

crystal mist

エアースプレー


LINKA

家庭用

crystal mist

リンカ クリスタルミスト エアースプレー

取扱説明書

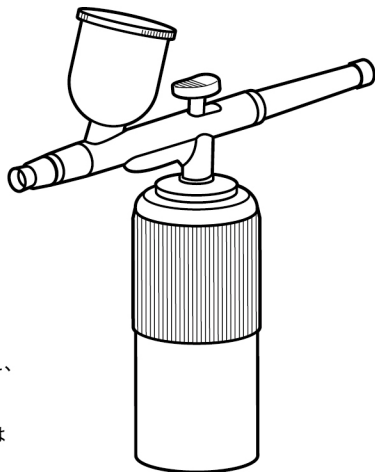

このたびは本製品を
お買い上げいただき、
誠にありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、
正しく安全にお使いください。
商品に同梱されている保証書は
大切に保管してください。

目 次

目次	1
安全上のご注意	2
各部分の名称	8
ご使用の前に	9
パッチテスト	10
ご使用方法	11
お手入れ方法・保管	13
故障かな?と思ったら	14
よくあるご質問	15
製品仕様	16
充電池について	17
保証について	18
お問い合わせ先	19

安全上のご注意 — 必ずお守りください —

ご使用の前に必ず本紙をお読みになり、正しくご使用ください。

ここに示した注意事項は、商品を正しく安全にお使いいただき、お客様や他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。

異常が発生した場合や、故障状態のまま使用されますと身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、ただちに使用を中止してください。

⚠ 危険



禁止

- ◎本製品は充電式電池を内蔵しているので、火中投入、加熱・高温での充電・使用・放置をしない。
(発熱・発火・破裂の原因)
- ◎本体電極部分は水で湿らしたり触ったりしない。
(火災・感電・やけど・故障の恐れ)
- ◎改造は絶対にしない。
(ケガ・感電・火災の原因になる恐れ)

●**下記のような医用電気機器や家庭用電気治療器を使用している人、またその近くでは絶対に使用しない。**

- ◎ペースメーカーなどの体内植込型医用電気機器
- ◎人工心肺などの生命維持用医用電気機器
- ◎心電計や点眼器などの装着型の医用電気機器
(医用電気機器や家庭用電気治療器の誤動作、事故や体調不良の原因)



必ず守る

- ◎**必ず専用USBケーブルで充電する。**
(ショート・異常発熱による発火の恐れ)
5V/1A以上2A未満のACアダプターを使用する。
- *ACアダプターは付属されておりません。**

警告



禁止

● 次の症状に該当する方は使用しない。

- 心臓疾患の方
- 高血圧の方
- 出血性疾患・血友病疾患などの血液異常の方
- 疲労の激しい方・体調が特にすぐれない方
- 飲酒の後や薬を服用中の方
- 知覚・痛覚異常のある方
- 糖尿病等の疾患により皮膚異常がみられる方
- アレルギー体質の方
- ウイルス性のイボ、黒皮症の方
- アトピー性皮膚炎および皮膚病の方
- 美容機器の使用後に肌・頭皮にトラブルのあった方
(肌や身体のトラブル原因になる可能性)
- 妊娠初期の不安定期から出産直後(授乳中)までの方
- 生理中の方
- 成長過程の方
- 幼児や成長期の子供、および自分で意思表示できない方
(ホルモンバランスが不安定なため肌トラブルの原因になる可能性)
- 温度の感覚が自覚できない方
(やけど・感電・けがの原因になる可能性)

警告



禁止

- 以下のような部位には使用しない。
- 肌に傷や湿しん・はれものなどのある部位
- 皮膚炎・過度の日焼けなど、皮膚に異常のある部位



必ず守る

- 次のような方は、医師に相談のうえ、使用する。
- 今まで重い病気をした方
- 病院やクリニックで医師の治療を受けている方
- 骨折、整形などで使用部位に埋め込み手術を受けた方
- 急性疾患の方
- 感染症疾患の方
- 悪性腫瘍のある方
- 糖尿病など高度な末梢循環障害による知的障害のある方
- 敏感肌の方
- 肌や身体に痛み・異常を感じたらすぐ使用を中止する
(事故や肌・身体の問題・体調不良の原因)

警告



禁止

【電源にかかわる事項】

- 濡れた手でACアダプターやコンセントから抜き差ししない。
(感電・けがの原因)
- 本体・ケーブルを水につけたり、水洗いしたりしない。
- 本体・ケーブルは浴室や湿気の多い場所で使用・保管したり、洗面台の上など水のかかりやすい場所に置いたりしない。
- ACアダプターが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しない。
- USBケーブルや電源プラグを傷めない。
傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込む、つぶす など
(感電・ショートによる火災などの原因)
- コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしない。
(たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因)
- ねじれが戻らなくなったUSBケーブルは使用しない。
(USBケーブルの断線・火災・感電・火傷の原因)
- ACアダプターは水につけない。また、ACアダプターを浴室内や濡れた手で使用しない。(ショート・感電の原因)



必ず守る

- USBケーブル差し込み口、USBケーブル端子が濡れていないことを確認してから充電する。
(火災・感電・ショートの原因)
- 電源プラグは、根元まで確実に差し込む。
(火災・感電の原因)
- 掃除の際は、ACアダプターをコンセントから抜く。
(感電・けがの原因)
- 電源プラグ・器具用プラグにほこりが付着しないように定期的に掃除する。
(湿気などで絶縁不良になり、火災の原因)
→ACアダプターを抜き、乾いた布で拭いてください

警告



禁止

【本体にかかわる事項】

- 引火性のもの（ガソリン、ベンジン、シンナー他）の近くで使用しない。
（爆発・火災の原因）
- 火への投入、加熱をしない。
- 高温での充電・使用・放置をしない。
（充電式電池内蔵のため、発熱・発火・破裂の原因）
- 乳幼児の手の届く場所に保管したり、使用させない。
（事故・けがの原因）
- 分解しない。
（火災・感電・けがの原因）

→ 修理につきましてはお買い上げの販売店にご相談ください。



必ず守る

【異常・故障時には】

- 直ちに使用を中止する
ACアダプター使用時は、ACアダプターを抜く。
（火災・感電・けがの原因）

〈異常・故障例〉

本体、ACアダプター、USBケーブルが

- 変形したり異常に発熱している
- 焦げ臭いにおいがする
- 使用中に異音がする
（火災・感電・けがの原因）

→ ただちにお買い上げ販売店やお客様窓口にて点検・修理の依頼をする。

警告



禁止


- 本体は落としたり、ぶつけたりして衝撃を与えない。
(故障・けがの原因)
- 同じ箇所に過度に使用しない。
(肌を傷つけたり感染、炎症、出血、色素沈着などのトラブルや症状悪化の原因)
- 貴金属類や眼鏡をつけたまま使用しない。
→貴金属類:ピアス・ネックレス・時計など
(事故・肌トラブルの原因)
- 取扱説明書に記載されている美容以外の用途で使用しない。
(故障・けがの原因)
- 本体をアルコール・シンナー・ベンジン・除光液などの溶剤で拭かない。
(本体の表面に損傷を与える原因)
- ペットには使用しない。
(けがの原因)




必ず守る

- 電源プラグや器具用プラグを外す時は、USBケーブルを引っ張らずに必ず端子をしっかり持ちゆっくり引き抜く。
(感電・けがの原因)
- 充電時以外は、ACアダプターをコンセントから抜く。
(絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)
- ご使用前に本体に割れ・欠け・変形などの破損がないか確認する。
(肌を傷つける原因)
- 本製品本来の使用目的以外に使用しない。
(思わぬ事故につながる原因)

各部分の名称

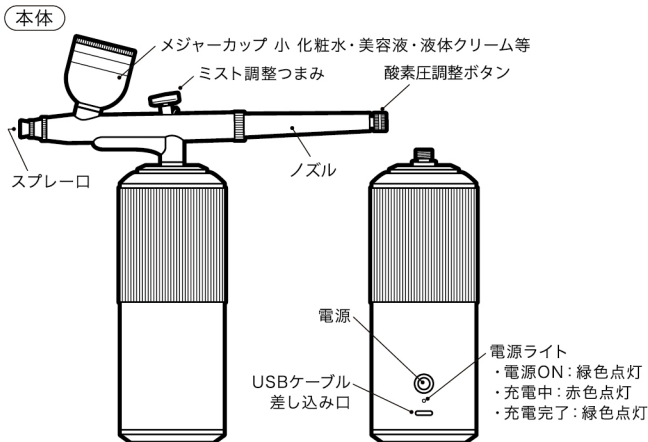

メジャーカップ 大

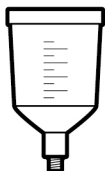

水
精製水
専用化粧水/スカルプウォーター等

USBケーブル



内容物

- 本体: 1台
- USBケーブル: 1本
- メジャーカップ大: 1個
- メジャーカップ小: 1個
- ノズル: 1個
- 取扱説明書 (保証書付き): 1部
- ※ ACアダプターは付属されていません

注意

※ 本体・付属品のデザイン・仕様は品質向上のため予告なく変更する場合がございます。

ご使用の前に

充電方法

充電をしながらのご使用はお止めください。

はじめて使用されるときや充電残量が減ったときは、本体の電源をオフにしてから充電をしてください。

- ① USBケーブルを本体USB差し込み口に差し込み、もう一方をACアダプターと接続してください。
- ② ACアダプターを壁面コンセントに差し込んでください。
※パソコン等のUSBポートからも充電は可能ですが、**一部のパソコン、モバイルバッテリー、アダプター、急速充電器では充電できない場合があります。**
- ③ 約2～3時間で充電が完了し電源ランプが緑色に点灯します。充電中は赤色のライトが点灯し続けます。充電が完了したらACアダプターをコンセントから抜いてください。

※動作時間が極端に短く、電源が切れてしまう場合は充電切れの合図です。充電をして再度ご使用ください。

●充電時間の目安●※

充電時間	動作時間
約2～3時間	連続使用時約0.5時間

※動作時間は普通に使用した場合の目安です。充電時間や動作時間は、電池の残量や充電環境、使用環境によって大きく前後します。

※充電推奨温度は15℃～35℃です。推奨温度外では充電時間がのびたり、充電しない場合があります。

※初めての充電や長期間ご使用にならなかった後に充電される場合、電池持続時間が短い場合があります。何度か充電・使用を繰り返すと正常に戻ります。

パッチテスト

お使いになる化粧品と本体が
肌に合わないことがないかのパッチテストを必ず行ってください。

- 1 | パッチテストを行う部位（腕の内側）をせっけんで洗い、
タオルなどで拭き取る。
- 2 | ご使用方法（P.11～12）の手順に沿って使用してください。
- 3 | 使用后24時間経過して肌に問題がなければ
継続して使用が可能です。

ご使用方法

- ①本体を専用充電コードから外し、電源スイッチを押してランプの点灯を確認します。
充電中は赤色のライトが点灯しています。充電が終了するとライトが緑色に変わります。

本体からコードを取り外すと同時にライトは消えます。

- ②専用化粧水/水/精製水/美容液/専用液体クリームなどをメジャーカップに注ぎます。

用途/ご希望の量によって大小のメジャーカップを使い分けてください。メジャーカップには指定の目盛り線以上の液体を注がないでください。

メジャーカップ 小




※ディープクレンジングとしてご使用の場合は②に記載の専用化粧水/水または精製水をご使用ください。

※オイル美容液などの粘度の高い化粧品はノズル詰まりの原因となりますのでご使用はお控えください。

※容器内で液体を長時間放置せず、ご使用後はすぐにきれいに洗ってよく乾かして収納してください。


メジャーカップ 大

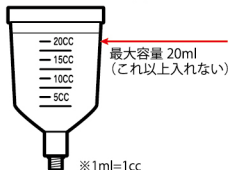

- ③下記の要領に従ってミストの量を調整し、お手入れ箇所にスプレーします。



- ①メジャーカップの蓋を開けます。
②②に記載の液体を注ぎます。
③ミスト調整つまみを前後に動かしてお好みのミスト量でキープします。

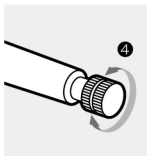

- ④酸素圧調整ボタンを左右に回して酸素圧を調整してください。



- ⑤お手入れしたい部分にスプレー口を向けてスプレーしてください。

※熱湯は火傷、容器の変形の可能性がありますので絶対にお止めください。

※推奨スプレー距離は10～15cmです。

※スプレーの際、ミストを吸い込まないようにご注意ください。むせる可能性があります。

- ④トリートメント作業を終了させる場合、再度電源スイッチを押してランプの消灯を確認します。

※本製品は湿気や水滴に対しての生活防水設計です。本体部分は防水設計されておりますが、USBケーブル差し込み口は防水となっておりますので差し込み口に水がかからないようにご注意下さい。

※水没厳禁

※専用USBケーブルは防水設計ではありません。

ご使用が終わりましたら、必ず毎回P13～お手入れ方法・保管に従ってお手入れ・保管してください。

また充電の際も上記に従ってお手入れの後充電してください。

おすすめプラン

機器内部で生成された高圧酸素と、微細分子（約0.021mm）となった液剤がノズルの先端からジェット噴霧され、お手入れしたい箇所に瞬時に作用します。

お肌、頭皮*の
洗浄と
水分補給
酸素補給

*頭皮にご使用の場合は
アウトバスでご使用ください

専用化粧水/精製水/水/スカルプウォーター等をメジャーカップ（大）に入れ、お好みの酸素圧に調整し、お手入れ箇所にスプレーしてください。酸素の圧力と微細に分子化された液剤により、お手入れ箇所を清潔にし、お手入れのたびに潤いを保てる肌作りをサポートします。

※毎回30～60秒のご使用をおすすめします。

※スキンケアの適量は約10mlです。

お肌のお手入れ
水分補給
酸素補給

化粧水/美容液/専用液体クリーム等をメジャーカップ（小）に入れ、お好みの酸素圧に調整し、お手入れ箇所にスプレーしてください。均一で繊細なミストがスキンケア商品の有効成分の浸透*をサポートします。

※角質層まで

※毎回30～60秒のご使用をおすすめします。1回のスキンケアの適量は2～3mlです。

お手入れ方法・保管

- 本体は乾いた布・水/水で薄めたアルコールで湿らせた布で軽く拭き取ってください。
※必ず本体の電源を切った状態で拭き取り、お手入れしてください。
※ブラシや金属製繊維の入った布は、本体を傷つけるためご使用はお避けください。
- ノズルのスプレー口は定期的にベビー用綿棒などでお掃除してください。少量のアルコールを水に混ぜてメジャーカップに注ぎスプレーすることも可能です。＊アルコール原液のご使用は避け下さい。
- メジャーカップはご使用後必ずすぐに取り外し水洗いしてください。またメジャーカップを外し、電源を入れたまま空噴霧し、ノズルの中の水分を出来るだけ飛ばし、乾燥した場所でよく乾かしてから保管してください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。また浴室など湿気の多い場所で絶対に保管しないでください。

長時間使用しない場合は

- 長時間使用しない場合は、電池の劣化を防止するために、最低1カ月に1回を目安にフル充電してください。
※リチウムバッテリーのため、使用していない間も電池は消耗します。

電池の寿命・交換不可

- 電池寿命：約2年
※電池寿命は、使用・保管状態によって大きく変化します。
※フル充電しても使用できる時間が極端に短くなった場合は電池の寿命と考えられます。
- 交換不可：電池の交換は出来ません。ご自身での電池交換作業は大変危険ですので絶対にしないでください。

故障かな？と思ったら

こんな時は	ここを確かめてください
電源が入らない	●充電できていますか？ →「ご使用の前に（充電方法）P9」にしたがって本体を充電してください。 ●USBケーブルをつないだままにいませんか？ →USBケーブルを抜いてください。 ●電源を入れるには、電源ボタンを押してください。
充電が開始されない	●ACアダプターは、コンセントに正しく差し込んでいますか？ ●ACアダプターは5V/1A以上を推奨しております。また、急速充電器は正しく充電出来ない場合があります。 ●USBケーブルは、差し込み口にしっかり差し込んでいますか？ ●同梱されている専用USBケーブルをご使用いただいていますか？ 専用ケーブルでない場合、正しく充電出来ないことがありますので、必ず付属のUSBケーブルをご使用ください。
使用中に電源が切れる	●充電切れではありませんか？ [→P9] ●使用中に誤って電源ボタンを押しませんでしたか？（電源ボタンを押すと、電源が切れます）
噴霧されない	●前回ご使用後にお手入れされなかった場合、ノズルが詰まっている可能性がございます。お手入れ方法・保管（P13）をよくお読みになりお手入れしてから再度ご使用ください。 ●ミスト調整つまみと酸素圧調整ボタンでスプレージ量を調整してください。

よくあるご質問

Q 充電して、液体を入れて、電源を入れてもスプレーが出ません。

A 酸素圧調整ボタンをしめすぎていませんか？
ボタンを左右に回して酸素圧を調整してください。酸素圧調整ボタンは時計回りに回すとミストの勢いが強くなり、液剤が細く噴霧されます。反時計回りに回すとミストの勢いが弱くなり、液剤が太く噴霧されます。

Q オイルは使用できますか？

A オイルなど粘度の高い美容液などのご使用は故障の原因となりますのでお避けください。また、それらの粘度の高い化粧品をご使用の形跡が見られた場合の故障は保証対象外とさせていただきます。

Q スプレーすればするほど効果を実感できますか？

A 同じ箇所に長い時間スプレーするのはお控えください。肌を傷める原因となります。
全体に均一にスプレーし、肌が冷たいと感じたところでお止めください。

製品仕様

定格入力電源	5V≒1A
定格出力	8W
本体外形寸法	約165×45×145mm
質量	約275g
カップ容量	5ml 20ml
主な材質	ステンレス・アルミニウム合金
充電池	リチウムイオン電池
充電池容量	850mAh
充電時間	約2～3時間

充電電池について

- 充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます。（電池寿命は、使用・保管などの状態により変化します。）
- 電池は交換には対応していません。
- 長期間使用しないときは、本体をフル充電してから保管します。また1カ月ごとに本品を動作させて、再度充電してください。長時間充電しないでおくと充電ができなくなることがあります。



本製品（本体）はリチウムイオン電池を内蔵しています。本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。

保証について

当保証とは取扱説明書や商品ラベルなどの注意書に沿って正しくご使用いただいた状態で故障が発生した際に無償修理を行うことをお約束するものです。期間中でも本製品の品質改善・向上のため、機能及び形状などを予告なく変更する場合があります。

また、本製品の運用、使用の結果として生じたいかなる損害に対しても一切の責任を負いかねます。

返品・修理

- 返品は未開封・未使用のもので、商品到着後7日以内、お客様送料ご負担にて承ります。
- 取扱説明書に従った上、正常な使用状態で故障した場合は、修理対応いたします。
- 保証期間内に故障した場合の無償修理のご依頼は、本製品・本保証書・ご購入時のお客様情報をご用意の上、販売店（販売サイト）にお問い合わせください。
- 自己の過失による破損は保証対象外とさせていただきます。
- 保証期間中でも、次の場合は有償の修理になります。
 - (1)使用上の誤りやお客様個人による修理・改造による故障及び損傷
 - (2)お買い上げ後の転倒・落下などによる故障や損傷
 - (3)天災や異常電圧による故障や損傷
 - (4)一般家庭以外（業務用の長時間使用など）に使用された場合の故障や損傷
 - (5)配送・移動・落下などによる故障や損傷
 - (6)発売元もしくは正規取扱店以外で購入した場合
 - (7)保証書のお買い上げ年月日・発売元の記入または押印がない、字句が書き換えられた場合
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 修理には対象となる本製品を当社が受領してから、2～3週間程度お時間をいただきます。
※本製品の故障状態によっては、さらにお時間をいただく場合がございます。
- 返品・修理のご依頼に関して、まずはお買い上げ販売店（販売サイト）にご連絡ください。
ご連絡がなく本製品を返送されましても対応できかねます。
- 修理・交換は、本製品の本体や付属品などが全てそろったお買い上げ当時と同一の状態であることが条件となります。
- 本製品が不良でない限り交換・返品を承ることはできかねます。また、使用方法が分からないなどの理由による交換・返品もお受けいたしかねます。また、衛生上の理由から一度でも使用した本製品のお客様都合による交換・返品はお受けいたしかねます。

お買い上げ1ヶ月以内	初期不良は無償修理・交換。送料は弊社負担
保証期間内	本製品の調整、付属品の交換などは無償。弊社宛の送料はお客様負担、当社からお客様宛は弊社負担

お問い合わせ先

故障のお問合せ、修理のご依頼については、
下記の製造販売元までご連絡願います。



製造販売元：株式会社 アイビビッド

〒184-0004 東京都小金井市本町1丁目8-14 2F
mail : cs_info@aivivid.co.jp

【お客様窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

株式会社アイビビッドは、お客様の個人情報及びご相談内容を、確認、交換、ご相談への対応及びその後の安全点検活動のために利用し、その記録を残すことがあります。株式会社アイビビッドは、個人情報を適切に管理し、業務委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供はいたしません。個人情報に関するお問い合わせは、お客様窓口にご連絡ください。